

INSTRUÇÕES DE USO DA ESCOVA DE LIMPEZA DESCARTÁVEL




AVISO: Verifique se as presentes Instruções de Uso correspondem ao produto adquirido, bem como sua respectiva versão. Este cuidado é importante para garantir o uso eficaz e seguro do produto. Caso deseje receber a versão impressa deste documento, contatar a empresa Endogerais Equipamentos Médicos Ltda por meio do telefone (27) 3063-8344 ou pelo e-mail endogerais@endogerais.com.br.

Documento de acompanhamento (Rótulo, Instrução do Usuário)


1 - Design de embalagem única:**OPEN**


		 0434	
Escova de Limpeza			
Modelo:		Quantidade: 1	
Diâmetro do canal:		  	
Comprimento do trabalho:			
			Prazo de validade:
			
	Fabricante: Changzhou Health Microporto Medical Device Co., Ltd. Adicionar: Heng'an Road 8, Zhenglu Heping Industrial Park Wujin, Changzhou, Jiangsu 213114, P. R. China Tel: +86-519-88963286 Fax: +86-519-88963839-601 E-mail: sales@cz-hmm.com Website: http://www.cz-hmm.com		
	Importador: Endogerais Equipamentos Médicos Ltda. Endereço: Rua Dom Jorge de Menezes, 1.180. Bairro Centro CEP 29.100-250. Vila Velha/ES, Brasil. Telefone: (27) 3063-8344 E-mail: endogerais@endogerais.com.br Responsável Técnico: Kevellim Pontes Freitas CREA ES 051406/D Registro Anvisa:		

2 - Design de embalagem exterior:

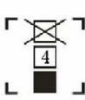		
Escova de Limpeza		
	Fabricante: Changzhou Saúde Microporto Médico Dispositivo Co. Ltd. Adicionar: Heng'an Caminho 8, Zhenglu Heping Industrial Parque Wujin, Changzhou, Jiangsu 213114, P. R. China Tel: +86-519-88963286 Fax: +86-519-88963839-601 E-mail: sales@cz-hmm.com Website: http://www.cz-hmm.com	
	Representante: Endogerais Equipamentos Médicos Ltda Endereço: Rua Dom Jorge de Menezes, 1.180. Bairro Centro CEP 29.100-250. Vila Velha/ES, Brasil. Telefone: (27) 3063-8344 E-mail: endogerais@endogerais.com.br Responsável Técnico: Kevellim Pontes Freitas CREA ES 051406/D Registro Anvisa:	
Modelo: Quantidade: 500 Peso líquido: 8kg Peso bruto: 7kg Tamanho do pacote: 590×290×350	 	    

Projeto de embalagem de transporte:

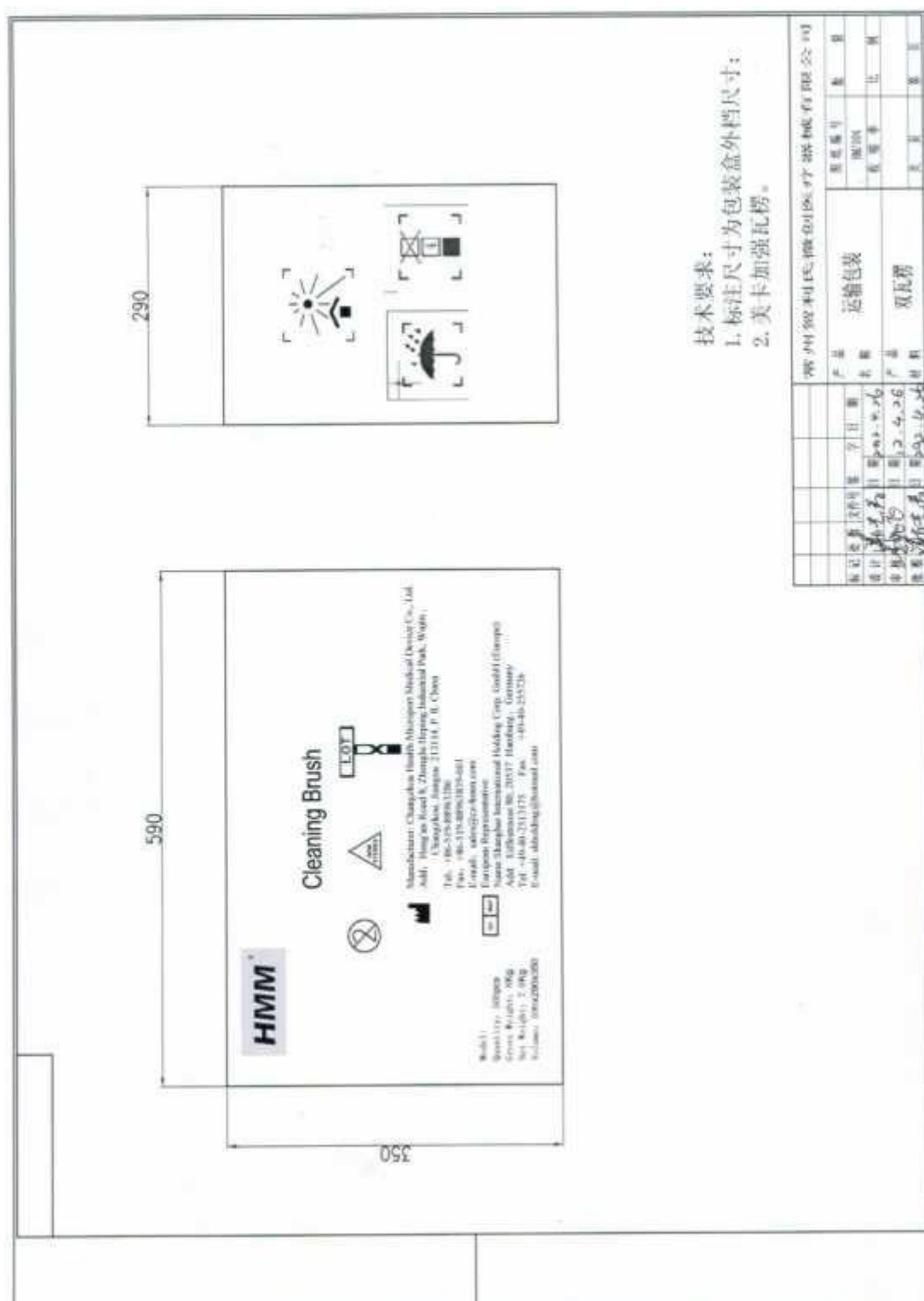

INSTRUÇÃO DO USUÁRIO



Leia este manual de instruções antes de usar

- **Nome do produto:** Escova de limpeza descartável
- **Gama de aplicação:** Usado para passagem assistida/sucção do endoscópio ou limpeza da cabeça de controle.
- **Estrutura do produto:** Diagrama da estrutura da escova de limpeza, como mostrado na figura 1.

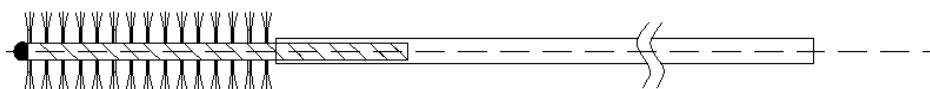


Figura 1

- **Dimensões Fundamentais:**

Escova de limpeza descartável

Modelo	Diâmetro externo (mm)	Comprimento de trabalho (mm)	Canal endoscópio (mm)	Personagem
HM/104-18-105-A	1.8	1050	≥ 2.0	Escova de forma reta
HM/104-18-120-A	1.8	1200	≥ 2.0	
HM/104-23-160-A	2.3	1600	$\geq 2,8$	
HM/104-23-180-A	2.3	1800	$\geq 2,8$	
HM/104-23-230-A	2.3	2300	$\geq 2,8$	

- **Aparência:**

1. O tubo externo da escova é liso sem cortina.
2. As cerdas da escova são macias, lúcidas, brilhantes, limpas e sem impurezas mecânicas óbvias, corpos estranhos e torção.

- **Desempenho do produto:**

1. Conecta com rapidez
 - 1). Tração única é maior que 0,1 kg, não quebra com facilidade.
 - 2). A junção de encolhimento térmico é firme, o que pode suportar a tração de 5kg para não cair.
2. Resistente à corrosão: Escova de limpeza com boa resistência à corrosão.

- **Matéria prima:**

A matéria-prima da peça principal da escova de limpeza deve estar em conformidade com as disposições da tabela 2.

Tabela 2: A matéria-prima da escova de limpeza é a parte principal

Nº	Peças do produto	marca de material	Padrão Nº.
1	Cerdas de pincel	PA6	GB16331-1996
2	cabo	06Cr19Ni10	GB18457-2001
3	Tubo externo	POM	GB/T 22271-2008

**Preparação:**

1. Verifique cuidadosamente se a embalagem está danificada, se houver algo anormal, não use, por favor, use o equipamento de espera.
2. Verifique cuidadosamente se o equipamento estiver em boas condições antes do uso, se houver algo anormal, não use, por favor, use o equipamento de espera.

Utilização:

1. Antes do uso clínico, familiarize-se com o dispositivo e leia todas as Instruções de Uso.
2. Inspeção o pacote para observar danos no transporte ou manuseio. Se o dano for evidente, não utilize este dispositivo.
3. Escova de limpeza do canal:
 - a) Usando a mídia de limpeza escolhida, avance a escova de limpeza por toda a extensão do endoscópio antes de inverter a direção. Inverter a direção dentro do endoscópio pode fazer com que a escova se expanda, o que poderia potencialmente danificar o endoscópio.
 - b) Usando a mídia de limpeza escolhida, passe a escova de limpeza do canal através das aberturas existentes da válvula.
4. Escova de limpeza da cabeça de controle:
 - a) Remova a válvula da cabeça de controle do endoscópio. Usando a mídia de limpeza escolhida, use a escova para limpar suavemente a válvula e as aberturas da porta. Evite torcer ou amassar a alça da escova. O cabo da escova impedirá que ela seja empurrada para fora das aberturas da válvula.
 - b) Usando a mídia de limpeza escolhida, limpe a cabeça de controle e os mostradores da cabeça de controle.

**Notas:**

- A escova de limpeza nunca deve ser usada como uma escova de citologia.
- Equipamento original as orientações do fabricante sobre o cuidado e limpeza dos canais individuais

do endoscópio. Devem ser revistas antes do uso de qualquer escova de limpeza.

- Descarte a escova de limpeza após o uso inicial. O acessório mecânico da escova na bainha de plástico não pode ser garantido como confiável ou seguro após o uso inicial.
- Se forem observadas curvas afiadas na baía plástica ou no cabo de arame durante a inserção da escova, a escova deve ser descartada para evitar causar danos aos canais de funcionamento do endoscópio.
- Nunca transfira uma escova de limpeza usada de um endoscópio para outro endoscópio, uma vez que a contaminação cruzada pode ocorrer e resultar em complicações no paciente. Escovas de limpeza descartáveis são projetadas para remover com segurança os detritos, alguns dos quais podem ser retidos na estrutura da cerda.
- Estes produtos destinam-se apenas ao uso de pacientes únicos. Nós não vamos assumir a responsabilidade pela segurança e eficácia deste dispositivo médico descartável após reaproveitamento, reprocessamento, remanufatura e/ou reesterilização por qualquer instituição, praticante ou terceiro.

Contraindicação:


- Se o canal for conhecido por ser ocluído ou a resistência for atingida na tentativa de passar a escova através do endoscópio, não force a escova de limpeza através do endoscópio, pois isso pode resultar em danos ao canal.
- Não utilize uma escova de limpeza específica em um canal específico se o uso não for recomendado pelo fabricante de equipamentos originais do endoscópio.
- Não deixar ao alcance de crianças.

Embalagem e armazenamento: O pacote único usa bolsas de plástico, o pacote do meio é uma caixa de papel branco, o pacote externo é de papelão. Armazenado em local ventilado, seco e fresco.

Período de validade: Cinco anos

Data de produção: Favor ver na embalagem.

Requisitos de armazenamento: Armazenar em gás não corrosivo e espaço bem ventilado, em que a umidade relativa do ar é inferior a 80%.

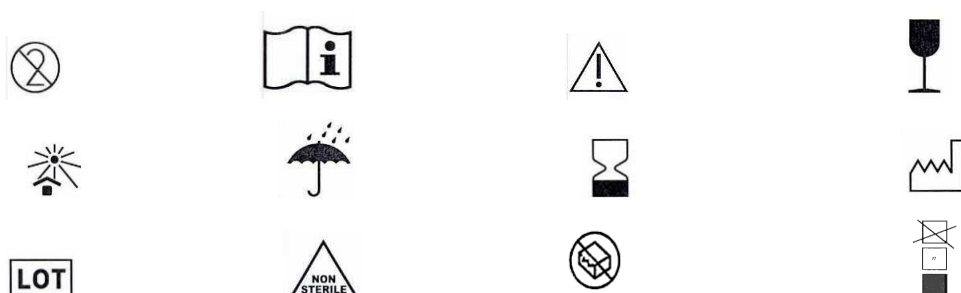Símbolos do rótulo:

Importador:

Endogerais Equipamentos Médicos Ltda.

Endereço: Rua Dom Jorge de Menezes, 1.180. Bairro Centro CEP 29.100-250. Vila velha/ES, Brasil.

Telefone: (27) 3063-8344

E-mail: endogerais@endogerais.com.br

Responsável Técnico: Kevellim Pontes Freitas CREA ES 051406/D