

INSTRUÇÕES DE USO DE BOCAL PARA ENDOSCOPIA FUTURE



ENDOGERAIS
Equipamentos

AVISO: Verifique se as presentes Instruções de Uso correspondem ao produto adquirido, bem como sua respectiva versão. Este cuidado é importante para garantir o uso eficaz e seguro do produto. Caso deseje receber a versão impressa deste documento, contatar a empresa Endogerais Equipamentos Médicos Ltda por meio do telefone (27) 3063-8344 ou pelo e-mail endogerais@endogerais.com.br.

Documento de acompanhamento (Rótulo, Instrução do Usuário)

1. Etiqueta de embalagem interna

BOCAL PARA ENDOSCOPIA JIUHONG MEDICAL

Fornecedor:



Endogerais Equipamentos Médicos Ltda.

R. Dom Jorge de Menezes, 1180 - Centro Vila Velha - ES. CEP: 29100-250

Tel: +55 27 3063-8344 / Cel: +55 27 99312-1718

e-mail: endogerais@endogerais.com.br

Contém:

**Bocal adulto para
endoscopia com elástico.**



O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO!



Adult HM/103-A1



Não use se o pacote estiver danificado.



CUIDADO!



Consulte instruções de uso.



01/11/2021



00001-021

Disposable Bite Blocks

Indicações, descrição, precauções, contraindicações, instruções de uso e informações técnicas acesse: **www.endogerais.com.br**

Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas menores que 35°C.

Responsável Técnico: Kevellim Pontes Freitas CREA ES 051406/D

Registro ANVISA nº: 81169960002

Fabricante:

Changzhou Health Microport Medical Device Co., Ltd.

Heng'an Road 8, Zhenglu, Heping Industrial Park, Tanning Changzhou, Jiangsu 213114, China.


Tel: +86-519-88963839-601

2. Rótulo de pacote externo

Bocal de mordidas



Nome: Changzhou Health Microport Medical Device Co., Ltd. Adicionar: Heng'an
Caminho 8, Zhenglu, Heping Industrial Parque Tianning, Changzhou, 213114
Jiangsu, China
Tel: +86-519-88963286
Fax: +86-519-88963286
E-mail: localsales@cz-hmm.com
Site: <http://www.cz-hmm.com>

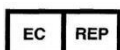

Importador: Endogerais Equipamentos Médicos Ltda
Rua Dom Jorge de Menezes, 1.180 Bairro Centro CEP 29.100-250
Vila Velha/ES, Brasil
Telefone: (27) 3063-8344
E-mail: endogerais@endogerais.com.br
Responsável Técnico: Kevellim Pontes Freitas CREA ES 051406/D
Registro Anvisa: 811699600002

Modelo:

Quantidade: 500 pcs


Peso líquido: 8 kg

Peso bruto: bruto:

7 kg

Tamanho do pacote:

590×290×350

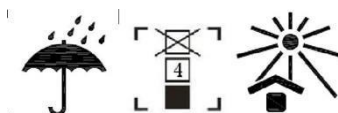

3. Instrução do usuário:

 Leia este manual de instruções antes de usar.

- **Nome do produto:** Bocal de mordida
- **Gama de aplicação:** Adequado para operação de gastroscopia e gastroscópio. Evite que os pacientes mastiguem o tubo gastroscópio.
- **Estrutura do produto:** É composto por bloco de mordidas e banda elástica. Diagrama da estrutura do bloco de mordidas, como mostrado na figura 1.

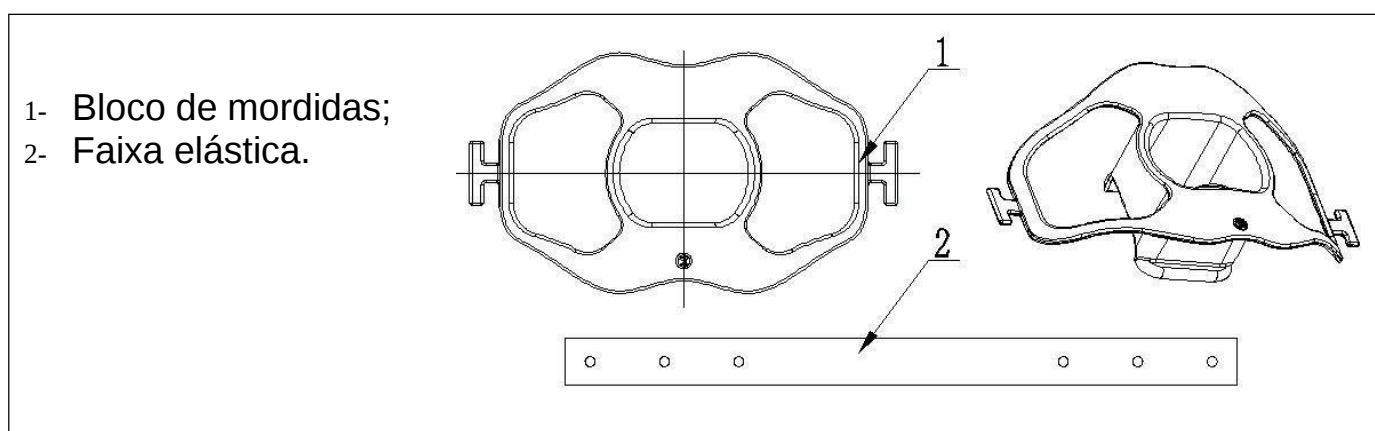


Diagrama da estrutura do bloco de mordidas Figura 1

- **Aplicação do produto:**

1. O bloco de mordidas é brilhante e limpo, sem impressora, sem rebarba.
2. A faixa elástica é macia e elástica.

- **Instrumento auxiliar:**

Endoscopia (Usuário deve trazer o seu próprio)


- Direção para uso:**

- 1 - Rasgue o interior da embalagem de plástico, tire o bloco de mordidas.
- 2 - Coloque o bocal de mordida na boca do paciente, dentro de casa, sem gás corrosivo.
- 3 - Após a uso, o bloco de mordidas deve ser o descarte de resíduos médicos para tratamento de Wast de acordo com as normas nacionais.


Notas:

1. Este produto é descartável, destruído após ser usado.
 2. Este produto deve ser armazenado em ambientes fechados, sem gás corrosivo.
 3. Se a embalagem estiver danificada, é estritamente proibido o uso.
- **Contraindicação:** Nenhuma.
 - **Embalagem e armazenamento:** Pacote único use bolsas de plástico, pacote médio é caixa de papel branco, pacote externo é caixa. Armazenado em interior ventilado, seco e frio.
 - **Prazo de validade:** 2 anos.
 - **Data de produção:** Favor, ver embalagem.
- Requisitos de armazenamento:** Armazenar em gás não corrosivo e sala bem ventilada, na qual o parente a umidade é inferior a 80%.

- Símbolo do rótulo:**

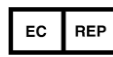Símbolo	Descrição do símbolo	Símbolo	Descrição do símbolo
	Cuidado		Use por data
	Data de fabricação		Não-Estéril
	Consulte as instruções de uso		Código de lote
	Não reaproveitar		Fabricante
	Representante autorizado na comunidade europeia		Mantenha-se longe da luz solar
	Mantenha-se seco		Não use se o pacote estiver danificado

Modelo:

HM/103-A1: Bocal para endoscopia adulto

HM/103-A2: Bocal para endoscopia adulto largo

HM/103-A3: Bocal para endoscopia idoso

HM/103-A4: Bocal para endoscopia oxigênio

HM/103-P1: Bocal para endoscopia pediátrico.



: Changzhou Health Microport Medical Device Co., Ltd.

Endereço: Heng'an Road 8, Zhenglu, Heping Industrial Park,

Tianning, Changzhou, Jiangsu 213114, China

Tel.: +86-519-88963286

Fax: +86-519-88963286

E-mail: salez@cz-hmm.com

Site: <http://www.cz-hmm.com>

Importador: Endogerais Equipamentos Médicos Ltda

Rua Dom Jorge de Menezes, 1.180 Bairro Centro CEP 29.100-250

Vila Velha/ES, Brasil

Telefone: (27) 3063-8344

E-mail: endogerais@endogerais.com.br

Responsável Técnico: Kevellim Pontes Freitas CREA ES 051406/D

Registro Anvisa: 81169960002